


ECC0002P

Señales de vida...

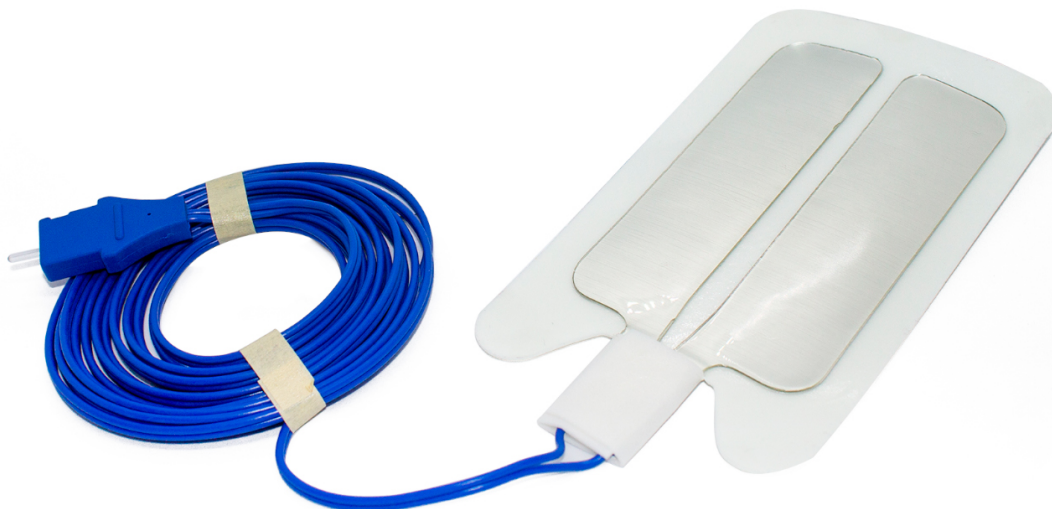

Placa desechable para electrocauterio, con cable REM, pediátrica

PRODUCTO	Placa desechable para electrocauterio, con cable REM, pediátrica
Catálogo	ECC0002P
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Categoría	Electrocirugía
Descripción	Electrodo neutro de dos superficies independientes con gel electroconductor, cable de 3 metros con conector REM, para paciente pediátrico.
Aplicaciones	Cerrar el circuito eléctrico del electrocauterio.
Características físicas	Placa bilobulada con gel electroconductor, cable de 3 metros con conector REM, foam color blanco, para paciente pediátrico.
Superficie total	124 cm ²
Superficie activa	66 cm ²
Color	Blanco

Color del cable	Azul
Longitud del cable	3 m
Estéril	Si
Conector	REM
Material	Electrodo de aluminio cubierto de una capa adhesiva electroconductor a base de agua y borde adhesivo de foam no hidrosoluble.
Talla de paciente	Pediatrico
Libre de látex	Si
Peso por unidad	59 gramos
Empaque	Bolsa metalizada sellada
Dimensiones del empaque	26.4 x 16.2 cm
Unidades por empaque	1
Vida útil	Un solo uso (desechable)
Vigencia	36 meses desde la fecha de fabricación (verificar empaque)

Marca	BMH
Origen	México
Certificaciones	ISO 9001, ISO 13485, COFEPRIS
Registro Sanitario	173300CO320517

EQUIVALENCIAS

Fabricante	Número de parte
Cuadro básico	
3M	70200730862
Conmed	410-2000
Covidien > Valleylab > Kendall	E7510-25
Erbe	20193-076
FIAB	F7820PW/V/1
OBS	1031 BC

COMPATIBILIDAD

Fabricante	Modelo
Aesculap	Nelson
Conmed	Modelos System, modelos Sabre, Excalibur Plus
Covidien > Valleylab	Modelos Force, LigaSure
Erbe	ICC 200, ICC 350, VIO 100C, VIO 300S, VIO 300D, VIO 3
OBS	OBS-100, OBS-100C

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

Temperatura de almacenamiento	de -10 a 40 grados
Almacenamiento	En un lugar fresco, seco y limpio. Evitar exposición directa al sol por periodos prolongados.

PRECAUCIONES

- Asegurarse de que la placa se encuentra adherida de manera homogénea al paciente.
- No reutilizar el producto.
- No utilizar si el empaque presenta aperturas o daños.
- No utilizar si la placa se encuentra visiblemente seca
- Evitar colocar el electrodo en zonas con hueso, con cicatriz, que cubren un implante o mucho tejido adiposo.

DATOS DEL FABRICANTE

Empresa	BMH Intenacional, S.A. de C.V.
Dirección	Av. Ignacio Morones Prieto No. 1500, Nuevas Colonias, Monterrey, NL 64710
País	México
Página WEB	https://bmh.lat/
Correo	info@bmh.lat

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Empresa	Aztec Medic S.A. de C.V.
Dirección	Martin Carrera 301, Regina, Monterrey, N.L., 64290
Teléfono	81 8536-3300
Correo	info@aztecmedic.com